




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS duschsits 450 med hål, manuellt höjd- och sido reglerbar R7441112000
Färg	VVS: 777536400 NRF: 6311185 EAN: 5708590312415 HMI: 71797 NBS: N13:448 FDA: INN/D135865 Vit
Beskrivning	 PLUS duschsits 450 med hål, uppfällbart, med ryggstöd. Höjdregerbart 360 mm och sidoregerbart, utan användning av verktyg. Antracitgrå täckplatta på lodrät väggskena. Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Till eftermontering på existerande vågrät PLUS väggskena (medföljer ej). PLUS duschsits 450 med hål, uppfällbart, med ryggstöd. Höjdregerbart 360 mm och sidoregerbart, utan användning av verktyg. Antracitgrå täckplatta på lodrät väggskena. Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Till eftermontering på existerande vågrät PLUS väggskena (medföljer ej).
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet	Höjd- och sidoregerbar 360 mm Max brukarvikt: 200 kg När duschsitsen belastas med 200 kg, belastas varje fästskruv med 23 kg. <i>PLUS duschsitsar testas statiskt med säkerhetsfaktor 1,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmiddel.</i>
Material Ergonomi Funktioner	Duschsätet är framställt i anodiserad aluminium och polyuretanskum som är gjutet runt en plywoodkärna och gjuten med en yta av klar PU-lack. Ändarna på ryggstödet och sätet är förseglade med ändpluggar i ABS. Ergonomisk sits - säte 450 x 437 mm. Sitsen är utförd i ett mjukt och halkfritt material som aldrig känns kallt samtidigt som det ger en god sittkomfort. Sits kan fällas upp mot väggen efter användning.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

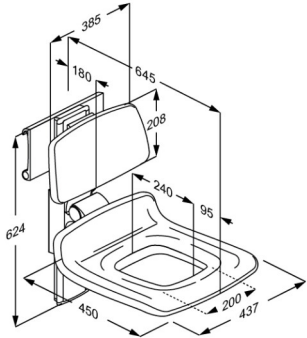

PRESSALIT®

Product	PLUS duschsits 450 med hål, manuellt höjd- och sido reglerbar
Varunummer	R7441112000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70% Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®