




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS duschsits 310, manuellt höjdglerbar R7302000
Färg	Vit
Beskrivning	 PLUS duschsits 310, uppfällbart, med rygg- och armstöd. Höjdglerbart 230 mm, utan användning av verktyg. Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Armstöd med greppfast tvåkomponentsplast är tålig och lätt att rengöra. Till eftermontering på existerande lodrät PLUS väggskena (medföljer ej). PLUS duschsits 310, uppfällbart, med rygg- och armstöd. Höjdglerbart 230 mm, utan användning av verktyg. Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Armstöd med greppfast tvåkomponentsplast är tålig och lätt att rengöra. Till eftermontering på existerande lodrät PLUS väggskena (medföljer ej).
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet	Höjdglerbar 230 mm Max brukarvikt (sits): 200 kg Max belastning armstödd: 55 kg När duschsitsan belastas med 200 kg, belastas varje fästskruv med 23 kg. <i>PLUS duschsitsar testas statiskt med säkerhetsfaktor 1,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet.</i>
Material Ergonomi Funktioner	Duschsätet är framställt i anodiserad aluminium och polyuretanskum som är gjutet runt en plywoodkärna och gjuten med en yta av klar PU-lack. Ändarna på ryggstödet och sätet är förseglade med ändpluggar i ABS. Ergonomisk sits - säte 310 x 365 mm. Sitsen är utförd i ett mjukt och halkfritt material som aldrig känns kallt samtidigt som det ger en god sittkomfort. Både sits och armstöd kan fällas upp mot väggen efter användning. Sits, rygg- och armstöd kan justeras parallellt via ett enkelt och säkert klicksystem. Armstöden kan dessutom höjdgleras oberoende av sits och ryggstöd.

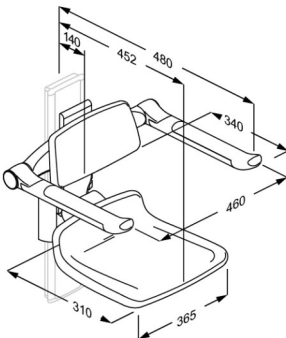

PRESSALIT®

Product	PLUS duschsits 310, manuellt höjdglerbar
Varunummer	R7302000
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:Erisan OXY+ Tvättspirit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Viktigt: PUR-ytor på PLUS duschsitsar och PLUS ryggstöd innehåller en antibakteriell beläggning som kan skadas om den används av annat än såpa och vatten för rengöring. Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.

pressalit.com

PRESSALIT®