




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS duschsits 450, manuellt höjdreglerbar R7400000
Färg	Vit
Beskrivning	 PLUS duschsits 450, uppfällbart. Höjdreglerbart 230 mm, utan användning av verktyg. Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Armstöd med greppfast tvåkomponentsplast är tålig och lätt att rengöra. Till eftermontering på existerande lodrät PLUS väggskena (medföljer ej). PLUS duschsits 450, uppfällbart. Höjdreglerbart 230 mm, utan användning av verktyg. Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Armstöd med greppfast tvåkomponentsplast är tålig och lätt att rengöra. Till eftermontering på existerande lodrät PLUS väggskena (medföljer ej).
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet	Höjdreglerbar 230 mm Max brukarvikt: 200 kg När duschsitsan belastas med 200 kg, belastas varje fästskruv med 47 kg. <i>PLUS duschsitsar testas statiskt med säkerhetsfaktor 1,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet.</i>
Material Ergonomi Funktioner	Duschsätet är framställt i anodiserad aluminium och polyuretanskum som är gjutet runt en plywoodkärna och gjuten med en yta av klar PU-lack. Ändarna på sätet är förseglade med ändpluggar i ABS. Ergonomisk sits - säte 450 x 437 mm. Sitsen är utförd i ett mjukt och halkfritt material som aldrig känns kallt samtidigt som det ger en god sittkomfort. Sits kan fällas upp mot väggen efter användning.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

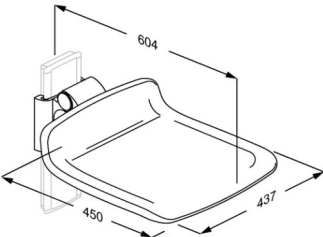

PRESSALIT®

Product	PLUS duschsits 450, manuellt höjreglerbar
Varunummer	R7400000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70% Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.

pressalit.com