




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS toalettarmstöd med fjäderbelastning, höjd/sido reglerbart RF575182000
Färg	Vit
Beskrivning	 PLUS toalettarmstöd med fjäderbelastning, längd 920 mm. Ergonomisk design, som ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man skal resa eller sätta sig. Vänster hand manövrerad. Höjddreglerbart 240 mm och sidoreglerbart. Avtagbart och uppfällbart. Ljusgrå täckplatta på lodrät väggskena. Material: Aluminium med greppfast tvåkomponentsplast. Till eftermontering på existerande vågrät PLUS väggskena (medföljer ej). PLUS toalettarmstöd med fjäderbelastning, längd 920 mm. Ergonomisk design, som ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man skal resa eller sätta sig. Vänster hand manövrerad. Höjddreglerbart 240 mm och sidoreglerbart. Avtagbart och uppfällbart. Ljusgrå täckplatta på lodrät väggskena. Material: Aluminium med greppfast tvåkomponentsplast. Till eftermontering på existerande vågrät PLUS väggskena (medföljer ej).
Justerbar Höjdjustering	Höjd- och sidoreglerbar 240 mm
Produktkapacitet	Maximal belastning: 150 kg. När toalettarmstöden belastas med 150 kg, belastas varje monterings skruv med 44 kg.
	<i>PLUS toalettarmstöd är testad statiskt med respektive 700 kg (tät på väggen), 425 kg (på midten) och 225 kg (på yterpunkt).</i>
Material	Toalettarmstöden är främst framställt i 10-mikrometer anodiserad aluminium. Greppen är belagda med en glidyta av termoplastisk elastomer (TPE) som omsluter en glasförstärkt nylonkärna. Interna komponenter och fästelement är främst gjorda av rostfritt stål.

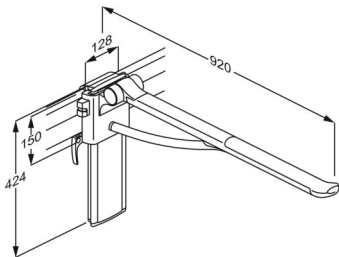

PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS toalettarmstöd med fjäderbelastning, höjd/sido reglerbart RF575182000
Ergonomi Funktioner	Stabilt stöd i form av ergonomiska toalettarmstöd ger ökad trygghet till den sittande brukaren och underlättar samtidigt den dagliga förflyttningen från och till hjälpmedel. Ett bra toalettarmstöd ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man ska resa eller sätta sig. Toalettarmstöden är försedda med ett gångjärn som gör det möjligt att fälla upp toalettarmstöden mot väggen. Uppfällbara toalettarmstöd ger gott om plats i rummet när de inte används. Toalettarmstöd monterade på väggskenor ger stor flexibilitet i den enskilda brukarens behov för plats och stöd.
Garanti Rengöring	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå. Avsedd användning Toalettarmstödet används som stöd för en person som ska sätta sig på eller resa sig från en toalett, eller vid sidoförflyttning från rullstol. Användningsmiljö För användning inomhus i våtrumsmiljö, till exempel ett badrum, i privata hem, på vårdhem och sjukhus. Vid yrkesmässig användning är den förväntade livslängden 10 år. <i>Livscykeltest har utförts enligt ISO 17966:2016.</i> För underhåll hänvisas till användnings – underhållsinstruktion som är anslutna till produkten, detta finns på hemsidan under "Downloads".



PRESSALIT®

Product	PLUS toalettarmstöd med fjäderbelastning, höjd/sido reglerbart
Varunummer	RF575182000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®